

SOL-M™ Feindosierungsspritze

Dreiteilige 1 ml Einmalspritze mit Luer Ansatz


Mit der neuen SOL-M™ Einmalspritze mit Luer-Ansatz wird das B. Braun Programm der Feindosierungsspritzen um eine neue 1 ml Variante ergänzt. Die neue 1 ml Einmalspritze eignet sich aufgrund ihrer Vorteile für das präzise Aufziehen und die exakte Verabreichung kleinster Volumina. Aufgrund des integrierten Spardorns hat sie kaum Totraumvolumen.

ANWENDERVORTEILE

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Kaum Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für extrem genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

SOL-M™ 1 ML

- Totraumvolumen von 0,0173 ml
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Kolbenstopfen aus latexfreiem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Spritzenkolben mit Spardorn **1**
- Mit integriertem Kolbenstopp **2**
- Frei von Latex und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

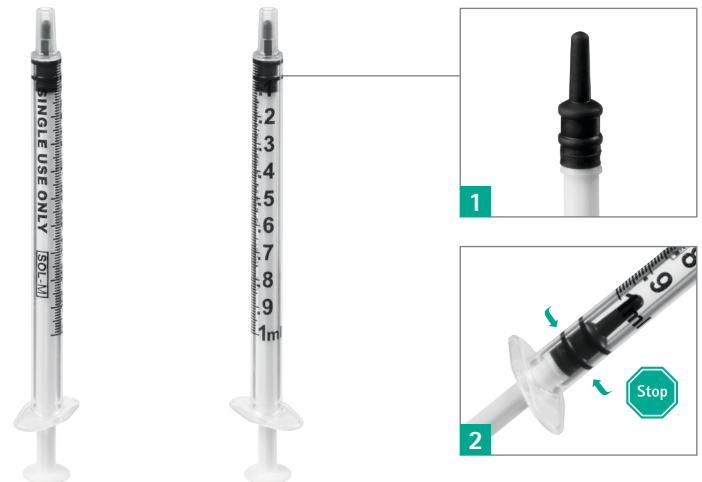

SOL-M™ 1 ML MIT LUER-ANSATZ, GEFERTIGT NACH ISO 7886-1:2017

Produkt	Größe	Ansatz	Graduierung	VE* /Karton	Art.-Nr.	PZN**
SOL-M™	1 ml	Luer	0,01 ml	8 x 100 Stück	180011LDS	17391358

*VE Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, **PZN gültig für Packung zu 100 Stück