

Infusions-/Transfusionsgeräte für verschiedene Applikationstechniken



Infusionsgeräte für die Druck- und Schwerkraftinfusion

Intrafix® Air P / Intrafix® Primeline  Standard-Infusions- gerät für Druck- und Schwerkraft- infusionen Flüssigkeitsfilter: Porengröße 15 µm im Boden der Tropf- kammer zum Schutz vor groben Partikeln	Intrafix® SafeSet  Premium-Infusions- gerät für Druck- und Schwerkraft- infusionen AirStop-Filtermem- bran im Tropfkam- merboden: wirkt wie eine Barriere gegen Luft Eintritt in die Infusionsleitung; Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80 % für Partikel der Größe 3 µm PrimeStop-Schutz- kappe am Ende der Leitung: ist mit einer hydrophoben, bakteriendichten Membran ausgeklei- det, die das Austre- ten von Flüssigkeit verhindert und zum Schutz vor Kontami- nation beiträgt	Intrapur® Inline Set  Standard-Infusions- set mit 0,2 µm Inlinefilter für Schwerkraft- infusionen Flüssigkeitsfilter: Porengröße 15 µm im Boden der Tropf- kammer zum Schutz vor groben Partikeln Integrierter Inline- filter: 0,2 µm, ungeladene Membran, geringe Proteinbindung, Polyethersulfon	Dosifix®  Infusionsgerät mit Dosierbehälter (150 ml) für Druck- und Schwerkraft- infusionen – Arzneimittelzubere- itung und -appli- kation in einem nachweislich ge- schlossenen System	Exadrop®  Infusionsgerät mit Präzisions- Tropfenregler für die Schwerkraft- infusion - Infusionsgerät Intrafix® Primeline oder Intrafix® SafeSet - Präzisions- Tropfenregler anstelle einer Rollenklemme - Genaue Dosierung der Tropfenrate innerhalb des Regelbereiches von 0 bis 250 ml/h, in ml ablesbar	Intrafix® SafeSet Flush  Infusionsgerät für Druck- und Schwerk- kraftinfusionen für die vollständige Medikamentenappli- kation - Mit nadelfreiem Membranventil Caresite® oberhalb der Tropfkammer - Spülen der Infu- sionsleitung & vollständige Appli- kation des Medika- ments unter Einsatz von Intrafix® Primeline	Infusionssysteme Typ TIVA  Gebrauchsfertiges Komplettsystem für die totale intravenöse Anästhesie - Als 2-fach oder 3-fach TIVA-Set - mit oder ohne Zuleitungen (Original Perfusor® Leitungen) - Mit Infusionsgerät Intrafix® Primeline oder Intrafix® SafeSet	Cyto-Set®  Zweiteiliges, geschlossenes In- fusionssystem für die Verabreichung onkologischer Therapeutika und anderen kanzerö- genen, mutagenen oder reproduktions- toxischen Arzneimit- teln (CMR-Stoffe) - Produktkombina- tion bestehend aus Hauptinfusions- leitung sowie ein bis vier Cyto-Set® Mix oder Cyto-Set® Line Sekundär- leitungen - Cyto-Set® ist für die Schwerkraft oder Pumpeninfu- sionsanwendung	Sangofix® Air / Sangofix®  Transfusionsgerät mit/ohne Belüftung Filtermembran 200 µm in der Tropf- kammer Filterfläche: 11 cm² Schlauchmaterial: PVC	Dosifix® Transfusion  Infusionsgerät mit Dosierbehälter (150 ml) für Druck- und Schwerkraftin- fusionen, Arznei- mittelzubereitung und -applikation in einem nachweislich geschlossenen System
--	---	--	---	--	--	---	--	--	--

Infusionsgeräte für die Apparative Infusion




Infusionsgeräte mit spezifischem Pumpsegment für eine hohe Flussratengenauigkeit

Geeignet für:

Infusomat® Space






und Space^{plus} Infusomat®

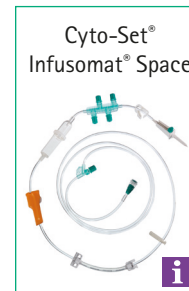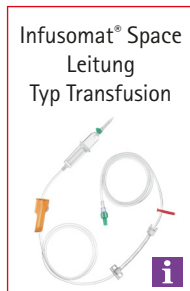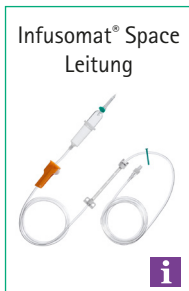

Geeignet für:

Infusomat® compact^{plus}

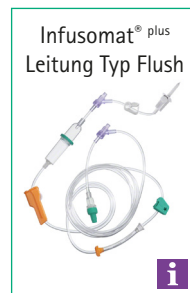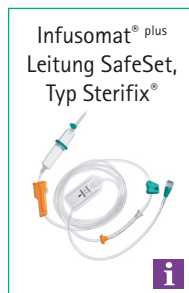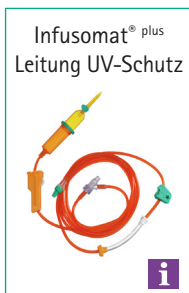

Standardversion

Flüssigkeitsfilter der Größe 15 µm in der Tropfkammer

PVC / PUR

AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden & PrimeStop Kappe

PVC / PUR

Standardversion oder AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden & PrimeStop Kappe

PUR

Leitung zur Transfusionstherapie

Filtermembran 200 µm in der Tropfkammer

PVC

Standardversion oder AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden & PrimeStop Kappe

0,2 µm Inline-Filter

PUR

Volumen des Dosierbehälters: 150 ml
auch UV-Protect-Varianten

PUR

AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden & PrimeStop Kappe

Nadelfreies Membranventil Caresite®

PVC / PUR

Leitung für die Schmerztherapie/Regionalanästhesie

NRFit® Konnektor

PUR

Leitung für die Applikation der enteralen Ernährung

ENFit™ Konnektor

PVC / PUR

Leitungen für die Zytostatikatherapie
Griffplatte mit 2 oder 4 Ventilen
Auch mit 0,2 µm Filter und UV-protect verfügbar
Mit/ohne AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden

