




Notfallmedizin und Onkologie

In der Veterinärmedizin

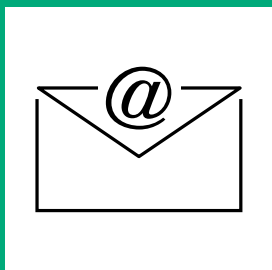

**Information:**

Der Katalog zeigt nur einen Auszug aus unserem Gesamtportfolio Notfallmedizin und Onkologie. Falls Sie Interesse an weiteren Produkten haben, sprechen Sie uns gerne an.
E-Mail: info@bbraun-vetcare.de



Es handelt sich bei dem Prospekt „Notfallmedizin und Onkologie“ um einen Auszug aus unserem Gesamtkatalog.

Bestellung Gesamtkatalog – B. Braun Vet Care

bbraun.info/bgk

**Webseite:**

bbraun.info/iusi

Notfallmedizin und Onkologie

Thoraxdrainage

Seite 4

Enterale Ernährung

Seite 5

Urologie

Seite 11

Intensivpflege

Seite 19



Thoraxdrainage



Pleuracan® A, Komplet-Set

Set zur Pleura- und Thoraxdrainage

- Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff (3,35 x 78 mm)
- Polyurethan-Katheter (2,7 x 450 mm); röntgenkontrastgebend mit Verschlussstopfen und Katheter-Schutzschlauch
- Aufsteckkanüle
- Doppelrückschlagventil Pneumothorax: Luft kann entweichen ohne dass Luft eindringen kann!
- Sekretbeutel 2,0 l
- Omnifix® Lock-Spritze, 60 ml
- Discofix® Dreiwegehahn

Pleuracan® B, Basis-Set

Set zur Pleura- und Thoraxdrainage

- Dünnwand-Punktionskanüle
Mit Kurzschliff 3,35 x 78 mm
- Certon® Katheter
Aus Polyurethan, Ø 2,7 mm, Länge 450 mm
Röntgenkontrastgebend
Verschlussstopfen
Katheter-Schutzschlauch
- Aufsteckkanüle
- Doppelrückschlagventil
Mit Verbindungsstück für Pleuracan®

Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Pleuracan® A, Komplet-Set, einzeln verpackt, steril	10 Stück	4462556
Pleuracan® B, Basis-Set, einzeln verpackt, steril	10 Stück	4462505

Enterale Ernährung


Ernährung fürs Leben



B. Braun enterale ENFit™ Produkte

Übersicht

- 1 Varianten mit Leerbeutel, ENPlus Spike, Universal Adapter
- 2 Drei-Wege-Hahn mit ENFit™ Anschluss passend für enterale Spritze mit ENFit™ Konnektor
- 3 Sondenseitiger ENFit™ Anschluss kompatibel mit Sonden mit ENFit™ Ansatz

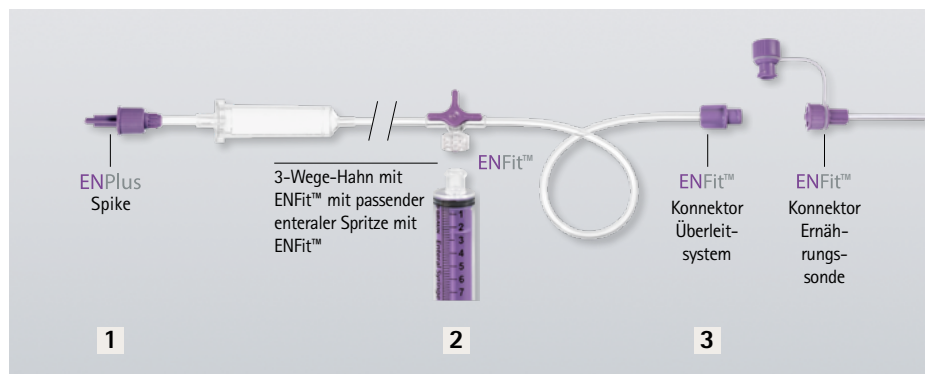

ENFit™ Nasogastrische Ernährungs sonden




- Violette Konnektoren für sofortige visuelle Unterscheidung
- ENFit™ Ansatz
- Inkompatibel mit intravenösen Systemen

Hinweis:

Gibt es auf Anfrage auch in weiteren Größen.

Bezeichnung	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
ENFit™ Tube CH5, 50 cm	100 Stück	9246593
ENFit™ Tube CH6, 60 cm	25 Stück	9246594
ENFit™ Tube CH8, 125 cm, mit Mandrin	25 Stück	9246578
ENFit™ Tube CH12, 110 cm, mit Mandrin	50 Stück	9246597
ENFit™ Tube CH12, 125 cm, mit Mandrin	25 Stück	9246586
ENFit™ Tube CH18, 110 cm	50 Stück	9246603

Spritzen

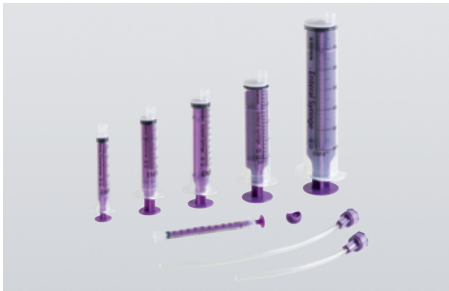


- Kann nur mit männlichem ENFit™ Konnektor verbunden werden
- Skala von 0,01 ml bis 1,0 ml, je nach Spritzenvolumen
- Leichte Ablesbarkeit dank durchsichtigem Zylinder
- Bessere Erkennung durch violetten Kolben
- Frei von Latex, BPA und Phthalaten (DEHP)
- Kleine Volumina: 1 ml, 2,5 ml und 5 ml

Bezeichnung	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
2,4 ml ENFit™ Spritze	200 Stück	4616025-01
5 ml ENFit™ Spritze	200 Stück	4616026-01
10 ml ENFit™ Spritze	200 Stück	4616027-01
20 ml ENFit™ Spritze	100 Stück	4616028-01
60 ml ENFit™ Spritze	100 Stück	4616029-01

B. Braun enterale ENFit™ Produkte


Übersicht

Überleitsysteme für die Applikation mit B. Braun Infusionspumpen

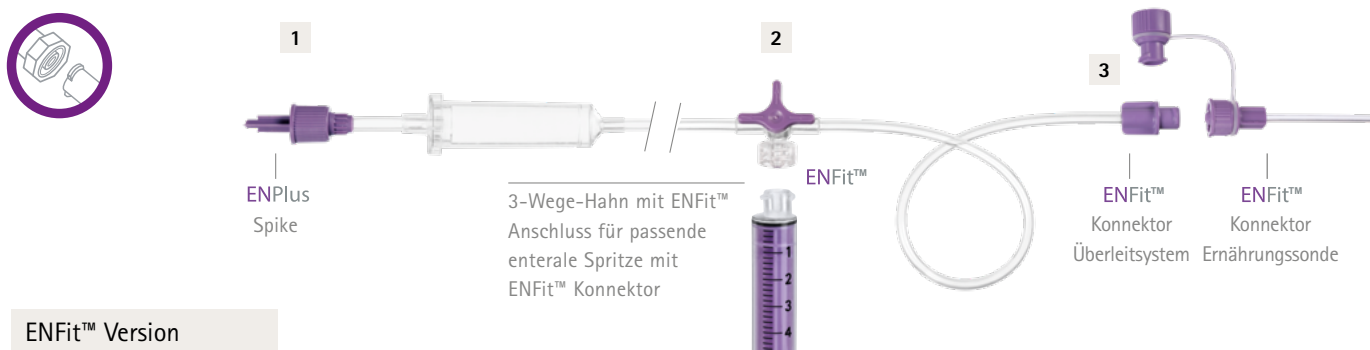

ENFit™ Version

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Varianten mit Leerbeutel, ENPlus Spike, Universal Adapter | 2 Drei-Wege-Hahn mit ENFit™ Anschluss passend für enterale Spritze mit ENFit™ Konnektor | 3 Sondenseitiger ENFit™ Anschluss kompatibel mit Sonden mit ENFit™ Ansatz |
|--|--|--|

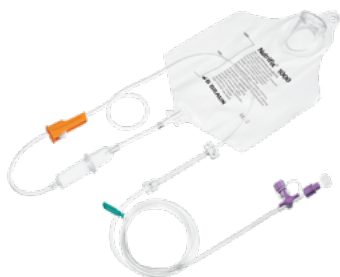

Infusomat® Space® Leitung Safety mit Leerbeutel, ENFit™

Überleitsystem mit Vorratsbeutel 1000 ml für die Applikation von Sondennahrung und Flüssigkeit mit der Infusionspumpe Infusomat® Space®

- Skalierung bis 1000 ml
- Sondenseitiger ENFit™ Anschluss kompatibel mit Ernährungssonden mit ENFit™ Konnektor
- 3-Wege-Hahn mit ENFit™ Anschluss passend für enterale Spritze mit ENFit™ Konnektor

	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
	25 Stück	8250830SP

Infusomat® Leitung mit Universal Adapter, ENFit™

Die Infusomat® Leitungen ENFit™ – für den handlichen Einsatz mit den B. Braun Infusionspumpen Infusomat® Compact Plus und Infusomat® Space® für die Applikation der enteralen Ernährung

- ENPlus Spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit ENPlus Port
- Universal Adapter kompatibel mit Kronkorkenflaschen und Weithalsflaschen



Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Infusomat® Space® Leitung, ENFit™, Universal Adapter	40 Stück	8250832SP

Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Infusomat® plus Leitung, ENFit™, Universal Adapter	40 Stück	8700370

Zubehör



Original Perfusor® Leitungen ENFit®

Infusionsleitung zur Verwendung mit Spritzenpumpen für die enterale Ernährung

- Enterale Original Perfusor® Leitung mit ENFit® Design zur Verwendung mit Spritzenpumpen für die Applikation der enteralen Ernährung
- Kompatibel mit enteralen Einmalspritzen und enteralen Einmalsonden mit ENFit™ Konnektoren
- Inkompatibel mit i. v. Systemen
- Material: PE
- Nicht hergestellt mit PVC, DEHP und Latex

Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Original Perfusor® Leitung Type ENFit™	25 Stück	87229910

Leerflasche



Cliniflex®, 1000 ml

Leerflasche zur zusätzlichen Gabe von Flüssigkeit bei enteral ernährten Patienten

- Kompatibel mit Überleitsystemen mit Universal-Adapter
- Fassungsvermögen 1000 ml
- Haltbarkeitsdauer von max. 30 Reinigungszyklen
- Zur Spülmaschinenreinigung bis 95°C geeignet
- Skalierung von 200 bis 1000 ml

Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Cliniflex®, 1000 ml	12 Stück	52598

B. Braun enterale ENFit™ Produkte

Übersicht

Kalkulation der enteralen Ernährung

Die enterale Ernährung sollte mit 25 – 50% der Zielkalorienzufuhr beginnen und über 12 – 72 Stunden kontinuierlich erhöht werden. Die Fütterung kann entweder als Dauerinfusion (CRI) oder als Bolusgabe erfolgen. Vor jeder Sondenfütterung sollte die korrekte Lage der Sonde kontrolliert werden. Hierfür wird die Sonde mit 2 – 5 ml 0,9% NaCl Lösung gespült. Bei der Bolusgabe ist die Portion über 30 Minuten langsam zu verabreichen. Hierfür empfiehlt sich ebenfalls die Fütterung mit Hilfe eines Perfusors oder Infusomaten. Anschließend wird die Sonde erneute mit 2 ml – 5 ml 0,9% NaCl Lösung gespült (Gesamtflüssigkeitsmenge beachten, evtl. andere Flüssigkeitsvolumina, z. B. IV Infusionsrate anpassen).

Bitte beachten Sie, dass für die folgende Kalkulation des Energiebedarfs die allgemeingültige Formel zur Berechnung des Ruheenergiebedarfs herangezogen wurde. $[RER (kcal/Tag) = 70 \times (\text{aktuelles Körpergewicht in kg})^{0,75}]$ (Verweis Nr. 15)]. Diese Beispielkalkulation soll lediglich als Übersicht dienen. Die Berechnung hängt von patientenspezifischen Faktoren ab und muss ggf. individuell angepasst werden. Die B. Braun Vet Care GmbH übernimmt daher für die Anwendung nach dieser Kalkulation keine Haftung.

Körpergewicht kg	Ruheenergiebedarf $70 \times \text{kg}^{0,75}$ ab Tag 3 kcal / Tag	Bolus aller 4 Stunden kcal / aller 4 h	CRI kcal
1	70	14	3
2	118	24	5
3	160	32	7
4	198	40	8
5	234	47	10
6	268	54	11
7	301	60	13
8	333	67	14
9	364	73	15
10	394	79	16
11	423	85	18
12	451	90	19
13	479	96	20
14	507	101	21
15	534	107	22
16	560	112	23
17	586	117	24
18	612	122	25
19	637	127	27
20	662	132	28
21	687	137	29
22	711	142	30
23	735	147	31
24	759	152	32
25	783	157	33
26	806	161	34
27	829	166	35
28	852	170	36
29	875	175	36
30	897	179	37
31	920	184	38
32	942	188	39
33	964	193	40
34	986	197	41
35	1007	201	42
36	1029	206	43
37	1050	210	44
38	1071	214	45
39	1092	218	46
40	1113	223	46
41	1134	227	47
42	1155	231	48
43	1175	235	49
44	1196	239	50
45	1216	243	51
46	1236	247	52
47	1257	251	52
48	1277	255	53
49	1296	259	54
50	1316	263	55



Urologie

Urologie

Einmalkatheter



Nelaton-Katheter

Einmalkatheter mit geschlossener Nelatonspitze, ohne Gleitmittel

- Ohne Gleitmittel
- Geschlossene Nelatonspitze
- Zwei seitliche Augen
- Katheterlänge: 40 cm
- Universalkonnektor
- Latexfrei
- Einzeln, steril verpackt

Ch.	Katheter	Länge		Verpackungseinheit	Art.-Nr.
● 08	Ø 2,7 mm	40 cm	Einmalkatheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500207
● 10	Ø 3,3 mm	40 cm	Einmalkatheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500208
● 16	Ø 5,3 mm	40 cm	Einmalkatheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500211
● 18	Ø 6,0 mm	40 cm	Einmalkatheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500212
● 20	Ø 6,7 mm	40 cm	Einmalkatheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500213
○ 12	Ø 4,0 mm	18 cm	Einmalkatheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500216
● 22	Ø 7,3 mm	40 cm	Rektal-Katheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500300
● 25	Ø 8,3 mm	40 cm	Rektal-Katheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500301
● 28	Ø 9,3 mm	40 cm	Rektal-Katheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500302
● 30	Ø 10,0 mm	40 cm	Rektal-Katheter mit Nelatonspitze	100 Stück	4500303

Dauerkatheter & absorbierende Systeme



Cystofix® Punktions-Set „Ready-to-use“ mit Polyurethan Pigtail-Katheter

Punktions-Set zur suprapubischen Blasenpunktion mit bereits in der Kanüle vor-eingelegtem Polyurethan Pigtail-Katheter

- Alle Komponenten DEHP-frei
- Erhältlich mit oder ohne 2 l Ablasshahnbeutel mit nadelfreier Probenentnahmestelle und Rückflusssperre

Diese Komplett-Sets sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Punktions-Sets „Ready-to-use“

Punktions-Komplett-Sets mit 2 l Urinbeutel „Ready-to-use“

Art	Ch.	Länge Katheter	Länge Kanüle	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Punktions-Sets „Ready-to-use“ mit Pigtailspitze	● 10	65 cm	8 cm	10 Stück	4450100
	● 10	65 cm	12 cm	10 Stück	4450120
	● 15	65 cm	12 cm	10 Stück	4450130
Punktions-Komplett-Sets „Ready-to-use“ mit 2 l Urinbeutel	● 10	65 cm	8 cm	10 Stück	4450150
	● 10	65 cm	12 cm	10 Stück	4450160
	● 15	65 cm	12 cm	10 Stück	4450170



Cystofix® Punktions-Set „Ready-to-use“ mit Integralballonkatheter, Silikon

Punktions-Set zur suprapubischen Blasenpunktion mit bereits in der Kanüle vor-eingelegtem Silikon-Ballonkatheter

- Der Katheter ist zum sofortigen Einsatz bereits in die Punktionskanüle eingelegt, dies stellt eine Zeitersparnis dar
- Alle Komponenten sind DEHP-frei

Diese Sets sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Punktions-Sets „Ready-to-use“ mit Integralballon, Silikon

Punktions-Set „Ready-to-use“ mit Pigtail und Standardballon, Silikon

Art	Ch.	Länge Katheter	Länge Kanüle	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Punktions-Sets „Ready-to-use“ mit Integralballon, Silikon	○ 12	40 cm	12 cm	10 Stück	4450200
	● 14	40 cm	12 cm	10 Stück	4450220

Urinbeutel und Zubehör



Medicare® Urinbeutel

Mit Rückflusssperre und Ablassventil

- Antirefluxventil
- Ablassventil
- Fassungsvermögen: 2 Liter
- Steril und unsteril verfügbar
- Latexfrei

Produkt	Schlauchlänge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
2000 ml, unsteril	90 cm	10 Stück	28114
2000 ml, einzeln, steril verpackt	90 cm	10 Stück	28115



Urimed® B'Bags Urin- & Sekretbeutel ohne Ablauf

Urinbeutel ohne Rücklaufsperrre und Ablassventil

- Beutelvolumen: 1,5 - 2 Liter
- Ohne Ablassventil, ohne Antirefluxventil
- Latexfrei
- Skala von 25 - 1500 ml/2000 ml

Produkt	Schlauchlänge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
2000 ml, unsteril	90 cm	250 Stück	29415
1500 ml, unsteril	90 cm	250 Stück	29435
2000 ml, steril	90 cm	100 Stück	29400
1500 ml, steril	90 cm	100 Stück	29420



Urimed® B'Bags Beutel

Unsteriler Urinbeutel

- Beutelvolumen: 500 ml
- Antirefluxventil
- DEHP-frei
- Skala von 50 - 500 ml
- Schlauch: 60 cm lang, kürzbar

Produkt	Schlauchlänge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
500 ml, unsteril	60 cm	10 Stück	28501A



Ureofix® 112 Plus

Geschlossenes Urindrainagesystem mit dem 3-fach Sicherheitskonzept

- Transparente Tropfkammer mit Membranventil, Einstecklasche zur Reduzierung von Kontaminationen, 1 Paar sterile latexfreie Handschuhe (puderfrei) inklusive belüfteter Urinbeutel 2 Liter
- Nadelfreie Probenentnahme am Stufenkegel
- Überleitungsschlauch 110 cm Länge mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme
- Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran: Reduzierung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr, guter Druckausgleich und stabiles Ablaufverfahren, selbst unter hoher Belastung
- Antirefluxventil
- Bodenablassventil mit Einstecklasche
- Aufhängung des Systems mit Haken, Kordel

Produkt	Schlauchlänge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
2000 ml, steril	110 cm	25 Stück	28431S

Intensivpflege und Zubehör



Uro-Tainer® NaCl

Gebrauchsfertige urologische Katheterspüllösung, mit Katheteranschluss

- NaCl Lösung 0,9%
- Nicht apothekenpflichtig
- Steriles Einmalsystem zur intravesikalen Instillation
- Hygienisches Einführen und Auffangen der Katheterspüllösung (keine Blasenspüllösung) ohne zu öffnen bzw. Luftzufuhr

Produkt	Volumen	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Uro-Tainer® NaCl	100 ml	10 Stück	FB99833



Uro-Tainer® M NaCl

Gebrauchsfertige urologische Katheterspüllösung, im Uro-Tainer® M, mit Medikamentenzugabestutzen

- NaCl Lösung 0,9%
- Nicht apothekenpflichtig
- Mit Zuspritzport
- Trägerlösung für Medikamente, die mittels Blaseninstillation verabreicht werden
- Hygienisches Einführen und Auffangen der Katheterspüllösung (keine Blasenspüllösung) ohne zu öffnen bzw. Luftzufuhr

Produkt	Volumen	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Uro-Tainer® M NaCl	100 ml	10 Stück	FB99853



Uro-Tainer® Polyhexanid (0,02 %)

Spüllösung zur Pflege von urologischen Dauerkathetern durch Reduzierung von Biofilm

- Polyhexanid Lösung 0,02 %
- Nicht apothekenpflichtig
- Steriles Einmalsystem zur intravesikalen Instillation
- Hygienisches Einführen und Auffangen der Katheterspüllösung (keine Blasenspüllösung) ohne zu öffnen bzw. Luftzufuhr
- Zur Reduzierung des Biofilms auf dem Katheter

Produkt	Volumen	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Uro-Tainer® Polyhexanid 0,02 %	100 ml	10 Stück	FB99965

Intensivpflege und Zubehör



Intensivpflege und Zubehör

Zur Pflege & Reinigung von Kathetern und Schleimhaut



Prontoderm® C

Gebrauchsfertige Lösung zur Hautreinigung

- Eintrittspforten urologischer Katheter, PEG/PEJ- Sonden, peristomale Bereiche
- Verwendbar mit allen handelsüblichen transurethralen und suprapubischen Kathetern
- „Leave-on“ Produkt, muss nicht wieder abgewaschen werden
- Für die wiederholte Anwendung
- Sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Kein Brennen nach der Applikation
- Einwirkdauer mindestens 1 Minute
- Haltbarkeit nach Anbruch 8 Wochen

Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
75 ml	65 Stück	400195



ProntOral®

Mundspüllösung

- Mundspüllösung zur Reinigung der Mundhöhle und des Rachens
- Sehr gute Schleimhautverträglichkeit
- Für den langfristigen Einsatz geeignet
- Speziell bei sensibler und problematischer Mundschleimhaut
- Alkoholfrei und mit angenehmem Pfefferminzgeschmack
- Indikationen: Mund- und Rachenräume

Produkt	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Rundflasche mit Dosierkappe 250 ml	10 Stück	400700



ProntoVet® Spüllösung

Sterile, gebrauchsfertige Lösung für die Reinigung, Spülung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden sowie Verbrennungen 1. und 2. Grades

- Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Intraoperative Reinigung und Spülung von Wunden
- Lösen verkrusteter Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen
- Reduziert Bildung von Biofilm
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch
- Inhaltsstoffe: 0,1 % Undecylenamidopropyl-Betain, 0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanid)

Ausführung	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
350 ml	10 Stück	400601



ProntoVet® Gel

Hydrogel für die Reinigung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1 + 2), fließfähige Konsistenz für Wundkavitäten

- Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Reduziert Bildung von Wundbelägen
- Geeignet für Wundkavitäten durch gutes Fließverhalten
- Schmerzarme Anwendung
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch
- Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polyhexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, Aqua ad injectabilia

Ausführung	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
30 ml, Patronenflasche	20 Stück	400600

Tipp aus der Praxis:

ProntoVet® Gel auf eine frische Wunde geben. Danach kann der Patient an der entsprechenden Stelle geschoren werden. Der Vorteil: Die Wunde ist durch ProntoVet® Gel gut vorbereitet und geschützt. Zudem können lose Haare mit dem Gel abgewischt werden.

Intensivpflege und Zubehör

Zur Pflege & Reinigung von Kathetern und Schleimhaut



Askina® Mullkompressen

Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten

- Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger
- 100% Baumwolle
- 100% chlorfrei gebleicht
- DIN EN 14079 - VM 17, Ph. Eur.

Ausführung		Abmessung	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
8-fach gelegt	Rezeptur-Packung – steril –	7,5 x 7,5 cm	5 x 2 Stück	9031111N
	Sprechstunden-Packung – steril –	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück	9031219N



Absaugkatheter

Typ Standard

- Medizinische Schlauchqualität
- Gute Gleiteigenschaften
- Gratfreie Schlauchoberfläche und atraumatisch abgerundete Katheterspitze
- Für geringe Schleimhautreizung
- Farbcodierte Trichteransätze
- Weich PVC 79 ± 4 Shore A
- Einzeln verpackt, steril

Produkt	Katheterspitze	Ø außen	Länge	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Zentrale Öffnung	gerade	2,0 mm	46 cm	100 Stück	4301064
Zentrale Öffnung	gerade	2,7 mm	46 cm	100 Stück	4301080
Zentrale Öffnung	gerade	4,1 mm	46 cm	100 Stück	4301129

Omnifix® Solo

Dreiteilige Wund- und Blaseneinmalspritze mit Katheteransatz

mit zentrischem Katheteransatz

hochtransparenter Zylinder

blaue, wischfeste Graduierung



- Hochtransparenter Zylinder mit blauer, wischfester Graduierung mit starkem Kontrast für gute Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei, einzeln steril verpackt, Packung zu 100 Stück

Omnifix® Solo 50 ml, Wund- und Blasenspritze

- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- 1,0 ml Skalierung

Variante	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
50 ml, nutzbar bis 60 ml	100 Stück	4613503F

SOL-M™ 100 ml Spritze mit Katheteransatz, mit Luer-Adapter

- Mit Luer-Adapter und Aspirationsgriff
- 2,0 ml Skalierung

Variante	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
100 ml	100 Stück	180100CT

Umrechnungstabellen

Umrechnung Millimeter in Charrière

Die Charrière-Zahl ist immer dreimal so groß wie der Außendurchmesser in Millimetern. Dividiert man die Charrière-Zahl durch 3, erhält man den Außendurchmesser der Kanüle oder des Katheters in Millimeter.

Umrechnung Millimeter in French und Inch

	French / Charrière	Millimeter	Inch
•	3	1	.039
•	4	1,35	.053
•	5	1,67	.066
•	6	2,0	.079
•	7	2,3	.092
•	8	2,7	.105
•	9	3,0	.118
•	10	3,3	.131
•	11	3,7	.144
•	12	4,0	.158
•	13	4,3	.17
•	14	4,7	.184
•	15	5,0	.197
•	16	5,3	.21
•	17	5,7	.223
•	18	6,0	.236
•	19	6,3	.249
•	20	6,7	.263
•	22	7,3	.288
•	24	8,0	.315
•	26	8,7	.341
•	28	9,3	.367
•	30	10,0	.393
•	32	10,7	.419
•	34	11,3	.445

Notizen

Handwriting practice area with 20 sets of horizontal dotted lines.

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.